


LABORATORIJSKI NAMEŠTAJ

pro:analytica KATALOG

2026

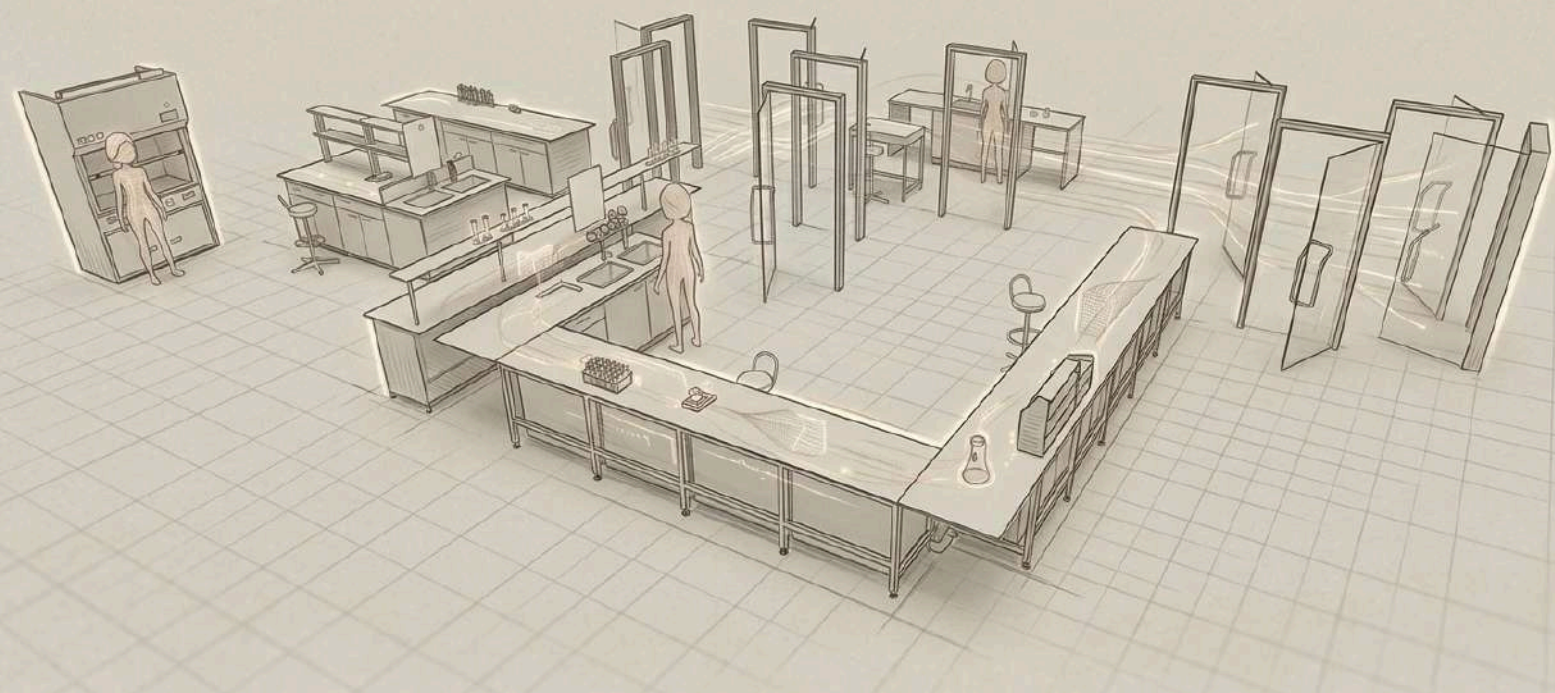

SADRŽAJ KATALOGA

UVOD	03
Laboratorijski stolovi	04
Elementi za skladištenje	08
Laboratorijski digestori	06
Sigurnosni kabineti	07
Ekstrakcione ruke	09
Neutralizacija	10
Kontakt	14





2006.

Služba za proizvodnju
laboratorijskog nameštaja
počinje sa radom

PROANALYTICA je 2000. godine započela svoju portfolio hemikalijama i instrumentacijom namenjenom pretežno za hemijske laboratorije. **Laboratorijski nameštaj** koji danas projektujemo i proizvodimo, u ponudi je od 2006. godine. Nakon 20 punih godina, u našoj ponudi možete naći **radne stolove, digestore, sigurnosne kabinete i sisteme za upravljanje isparenjima** prilagođene radu vaše laboratorije.

Naši projekti počinju još sa preprodajnim aktivnostima, a i nakon realizacije projekta, mi ostajemo u ulozi tehničke i aplikativne podrške.

LABORATORIJSKI STOLOVI

Zidni - Centralni - Antivibracioni - Pisaći

Laboratorijski radni stolovi se mogu praviti u bezbroj kombinacija dimenzija, oblika, opreme i namene. Prema mestu instalacije, mogu biti zidni (leđima naslonjeni uz zid) ili centralni (u sredini prostorije). Prema nameni mogu biti radni, sa sudoperom, antivibracioni, pisaći.

Što se dimenzija tiče, standardne visine su: 750mm za sedeći rad i 900mm za stojeći, dubine 600, 750 i 900mm, a dužine u skladu sa potrebama korisnika.

Standardne dimenzije podkonstrukcija stolova su 900, 1200, 1500 i 1800mm. Veće dužine se dobijaju kombinovanjem i dodavanjem navedenih.

Na centralnim stolovima se uglavnom obavlja najveći deo posla, pa su oni i najopremljeniji: najčešća konfiguracija je sa centralnom dvovisinskom policom za reagense, priključcima za struju i čeonu postavljenom sudoperom.



RADNE POVRŠINE



Monolitna keramika - Kompakt (HPL) - INOX - Univer

- Vlaga, visoke temperature i hemikalije su faktori koji utiču na vek radnih površina
- U hemijskim laboratorijama, potrebna je veća otpornost na hemikalije, pa se u tu svrhu tradicionalno koriste keramičke radne površine, s tim da je sa napretkom tehnologije, monolitna keramika zauzela mesto pločica koje su se lepile na drvenu podlogu
- Opciono, za radne površine se može koristiti i odgovarajuća vrsta kompakt ploča, kao što je MAXresistance2, od proizvođača FUNDERMAX. Ovaj materijal je novije generacije i svakodnevno mu se pronalaze nove primene.
- Uz kompakt ploče, najčešća je ugradnja polipropilenskih sudoperskih korita. LAB STREAM je proizvođač koji nudi laboratorijska korita i slivnike uz izbor oblika, dimenzija, boja i načina ugradnje
- Pri izboru radne površine, najvažnije je proučiti podatke o otpornosti materijala koje izdaje proizvođač ili nezavisna institucija. Ukoliko ne postoje podaci o, na primer, hemijskoj otpornosti, jasno je da taj materijal nije namenjen hemijskim laboratorijama

ELEMENTI ZA SKLADIŠTENJE

Podpultni - Viseći - Podnostojeći

U svakom radnom prostoru postoji mnogo komada opreme koji se koriste ređe ili češće, pa im je potrebno naći mesto za odlaganje, kako ne bi smetali dok nisu u upotrebi. Sitniji komadi se skladište u fiokama, a krupniji na policama, pa je neophodno napraviti dobru organizaciju prostora, da bi se uz opremu smestila i dokumentacija, potrošni materijal, rezervni delovi i drugo. Zato se podpultni elementi prave u kombinaciji fioka i vrata sa policama, slobodan prostor na zidovima iznad stolova koristi za instalaciju visećih elemenata. Najveći deo materijala se smešta u visoke elemente-ormane.

Podpultni elementi mogu biti fiksni-ugrađeni u noseću konstrukciju stolova ili mobilni.

Mobilni elementi daju slobodu korisniku da po potrebi promeni raspored, zameni oštećeni element bez problema ili na kratko obezbedi dodatnu radnu površinu.

Vrata visećih elemenata i ormara mogu biti puna ili staklena, krilna, sklapajuća ili klizna. Svi elementi imaju više visinskih položaja polica, meko zatvaranje vrata i fioka. Po potrebi, svi frontovi mogu biti sa mogućnošću zaključavanja.

Fiksni podpultni elementi i ormani se montiraju na čelične noge, tako da je uvek omogućeno čišćenje.



DIMENZIJE & MODELI

PODPULTNI ELEMENTI



Fiksni ili mobilni	Visina 660mm	Visina 810mm
Bez frontova	Otvoreni element sa ili bez unutrašnje police	
Samo frontovi	Do širine elementa 600mm ugrađuje se 1 front, od 600mm i više, ugrađuju se 2 fronta	
Fioka + frontovi	Do širine elementa 600mm ugrađuje se 1 front + 1 fioka, od 600mm i više, ugrađuju se 2 fronta + 1 fioka	
Samo fioke	4 plitke fioke ili 1 duboka + 2 plitke	5 plitkih fioka ili 1 duboka + 3 plitke

- Podpultni elementi se izrađuju od univera, debljine 18mm i obavezno su kantovani ABS trakom debljine 1 ili 2mm. Svi frontovi kao i fioke opremljeni su usporivačima, odnosno “soft-close” mehanizmima
- Razlikujemo dva modela podpultnih elemenata prema visini odnosno tipu stola ispod kog se postavljaju i tu je bitno definisati da li se koriste za stolove namenjene za sedeći ili stojeći rad. Dubina podpultnih elemenata je uvek 520mm
- Sledeća kategorija razlikuje fiksne i mobilne podpultne elemente. Fikse elemente postavljamo na čelične noge u antikorozivnoj epoxy-zaštiti i one uvek poseduju stope za nivelaciju. Mobilni elementi su postavljeni na PVC točkiće sa kočnicama i omogućavaju laku manipulaciju elementom u svrhu lakog pristupa kompletnom prostoru ispod stola ili eventualno kreiranjem dodatne radne površine po potrebi
- Za sve tipove podpultnih elemenata nudimo nekoliko varijanti organizacije unutrašnjeg prostora, a prema tabeli sa vrha stranice.

Dostupne širine elemenata su: 400 / 550 / 700 / 850 / 1000 mm

U VAŠEM PROSTORU



Sudoperski kao i standardni fiksni elementi sa opcijama unutrašnje organizacije prostora



Mobilni elementi za laboratorijske stolove - jednostavni za uklanjanje radi pristupa ili dodavanja radne površine, dodatnog manipulativnog prostora



Podpultni elementi za radne stolove - praktična organizacija dokumentacije, aksesoara, prilagođeno uslovima i kancelarije i laboratorije

KAKO DA PORUČITE ?

Napravili smo jedinstvenu platformu kako bismo vama olakšali način kreiranja upita, a potom i porudžbinu naše robe, a na svojoj strani ispratili novi, specijalizovani sistem rada.

Naš **KONFIGURATOR** laboratorijskog nameštaja dostupan je na sledećem linku:

<https://claude.ai/code/artifact/73c5b4d6-665e-46a1-aeec-6620c9312960>

a možete mu lako pristupiti i putem našeg sajta www.proanalytica.com na stranici “Laboratorijski nameštaj”





VIDIMO SE NA SLEDEĆOJ INSTALACIJI



Kontaktirajte nas

- +381(0)11 31-30-542
- namestaj@proanalytica.com
- www.proanalytica.com
- Bulevar umetnosti 27, 11070 Novi Beograd

www.proanalytica.com